



PANSEMENTS en fibres de carboxyméthylcellulose



Pansements en fibres de carboxyméthylcellulose

Composition/Description

- Pansements composés de **plus de 50 % de fibres non tissées de carboxyméthylcellulose (CMC) pure.**
- Ils se présentent sous forme de compresses ou de mèches.
- 1 SEULE gamme de pansement sur le marché :
AQUACEL®
AQUACEL® A



Pansements en fibres de carboxyméthylcellulose

Propriétés / Mode d'action

Gestion des exsudats

- Se transforme en un gel cohésif et doux au contact des exsudats
- Absorbe et retient les exsudats verticalement, en empêchant toute fuite latérale²
- Capte les bactéries et enzymes nocives présentes dans l'exsudat³⁻⁵




Adaptation au lit de la plaie ⁽¹⁾

- Minimise les espaces morts où les bactéries nocives peuvent se développer
- Le gel épouse parfaitement le lit de la plaie




Un respect des conditions de la plaie

- Maintient un environnement humide favorable à la cicatrisation de la plaie

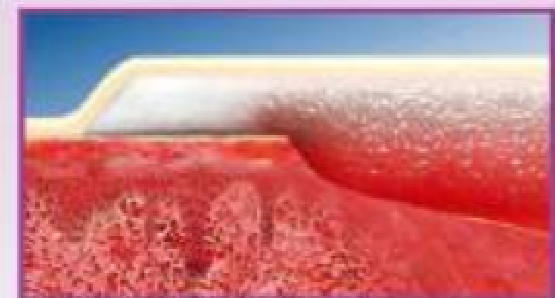

(1) : Robinson, B.J. The use of a hydrofiber dressing in wound management. J.Wound Care .

2 000;9 (1):32-34 et Hoeskstra MJ et al A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofiber or tulle gauze dressing. Journal of Wound Care 2002;11 (3):113-7

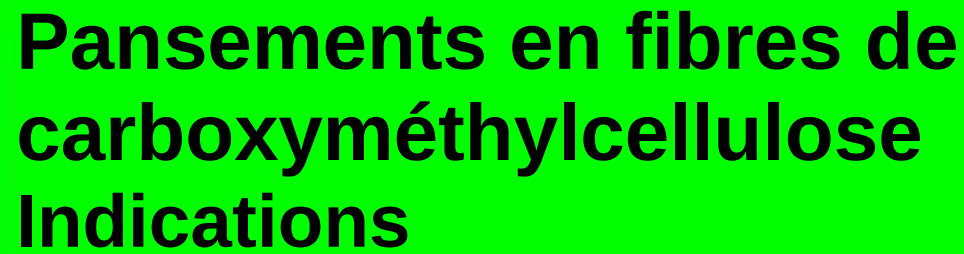

- plaies aiguës et chroniques très exsudatives sans distinction de phase.

- pour le traitement des plaies exsudatives et/ou anfractueuses non hémorragiques ;
- en utilisation sous un pansement choisi pour sa capacité à maintenir la plaie humide.



Pansements en fibres de carboxyméthylcellulose

Contre-Indications

- Brûlures du 3ème degré
- Plaies sèches ou peu sécrétantes
- Sensibilité connue à l'un des composants

Pansements en fibres de carboxyméthylcellulose

Mode d'emploi – Plaies planes



- Nettoyer la plaie à l'eau ou au sérum physiologique.
- Sécher délicatement le pourtour de la plaie.



- Appliquer le pansement AQUACEL® en choisissant une taille de pansement supérieure à la taille de la plaie



- Recouvrir d'un pansement secondaire permettant le maintien d'un milieu humide optimal.

Pansements en fibres de carboxyméthylcellulose


Astuces d'utilisation



- Placer le pansement avec un débord de 3 cm (protection efficace des berges et faciliter de retrait du Pansement)



***- Si l'exsudat est très important il est possible de superposer les pansements
AQUACEL® ou AQUACEL® Ag ou d'utiliser un grand format plié en 2 ou 4.***

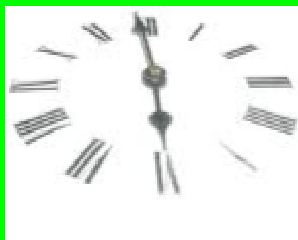

- Fréquence de changement : fonction de l'exsudat (tous les 2 à 3 jours).

Pansements en fibres de carboxyméthylcellulose

Mode d'emploi – Plaies creuses



- Nettoyer la plaie à l'eau ou au sérum physiologique.
- Sécher délicatement le pourtour de la plaie.



- Pour les plaies creuses ou tunnellisées, préférez des mèches.
- Placer le pansement avec un débord de 3 cm (protection efficace des berges et faciliter de retrait du pansement)



- Recouvrir d'un pansement secondaire permettant le maintien d'un milieu humide optimal.

Pansements en fibres de carboxyméthylcellulose


Astuces d'utilisation



- Laisser dépasser la mèche d'environ 3 cm (protection efficace des berges et faciliter de retrait du pansement)



- Si l'exsudat est très important vous pouvez recouvrir la mèche d'un ou plusieurs pansements AQUACEL® sous forme de plaque

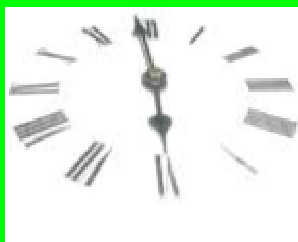

- Fréquence de changement : fonction de l'exsudat (tous les 2 à 3 jours).




Pansements en fibres de carboxyméthylcellulose

Critères de choix

- Formation d'un gel cohésif doux
- Excellente gestion des exsudats
- Parfaite adaptation au lit de la plaie
- Respect optimal des condition de la plaie



- Favorise la cicatrisation
- Evite la macération
- Protège la peau périlésionnelle
- Séquestre les bactéries et enzymes nocives
- Permet un retrait atraumatique

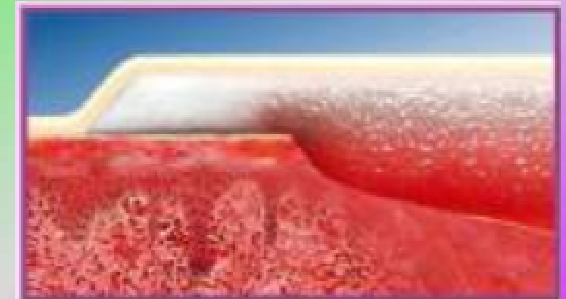




Pansements en fibres de carboxyméthylcellulose

Panorama du marché

Une exclusivité ConvaTec

AQUACEL®

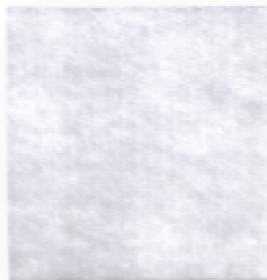

Plaies Exsudatives
(Chroniques/aïgues)



Sources

- Arrêté du 16 juillet 2010 relatif à la modification de la procédure d'inscription et des conditions de prise en charge des articles pour pansements inscrits à la section 1, chapitre 3, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale
- Dossier technique AQUACEL®